

Best.Nr. 0392SO
Cerapol Plus HP Kit


6 ausgewählte mit **Diamantkörnung** durchsetzte Polierer für rasche und problemlose Polierarbeiten auf Keramik. Das im Polierkörper gebundene Diamantkorn ersetzt die Diamantpolierpaste. Vorteil dieser Polierer = enorm lange Standzeiten.

Order No. 0392SO
Cerapol Plus HP Kit


*Kit consists of 6 assorted polishers, i.e. 2 points, 2 knife edges and 2 wheels. These polishers are manufactured from a special **Diamond** compound and are ideal for high speed ceramic finishing work. Cerapol Plus provides for a smooth and satin finish on all ceramic materials.*

Réf. 0392SO
Kit céramique Cerapol Plus PM

Choix de 6 **polissoirs diamantés par imprégnation** pour le polissage rapide et sans problème de la céramique. Les particules diamantées incluses dans le corps du polissoir remplacent la pâte à polir diamantée. L'avantage de ce polissoir est une très grande durabilité, même à grande vitesse, avec un résultat très naturel.

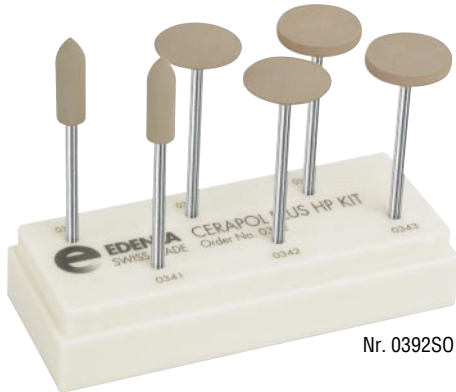

Nr. 0392SO

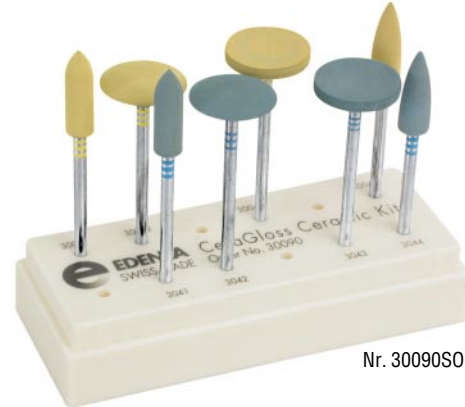

Nr. 30090SO

Best.Nr. 30090SO
CeraGloss HP Ceramic Kit


Spezielles **diamant-imprägniertes Oberflächen-Bearbeitungssystem** zum **Formen und Hochglanzpolieren** von **Labor-Keramiken**. Zeitsparender, einfacher Zwei-Stufen Prozess. Hoch-temperaturresistenter Synthekautschuk, mit natürlichen Diamantpartikeln höchster Qualität durchsetzt. Dies stellt eine schnelle Substanzreduktion sicher - kombiniert mit einem Hochglanzresultat für höchste ästhetische Ansprüche.

Order No. 30090SO
CeraGloss HP Ceramic Kit

*Unique **diamond-impregnated surface treatment system** for **contouring & high-gloss polishing of laboratory ceramics**. Time-saving, convenient two-step process. Synthetic, high temperature-resistant rubber with a unique concentration of top-grade natural diamond particles which ensure rapid surface reduction combined with a high-gloss result of unsurpassed excellence.*

Réf. 30090SO
Kit céramique CeraGloss PM

Système de traitement de surface à **polissoirs diamantés par imprégnation, pour le façonnage (vert) et le lustrage brillant (jaune) des céramiques** au laboratoire. Processus simple à deux étapes apportant un net gain de temps. Caoutchouc synthétique résistant aux températures élevées, incluant des particules diamantées naturelles. Ceci assure un enlèvement rapide de matériau en combinaison avec un résultat brillant répondant aux exigences les plus impératives en matière d'esthétique.

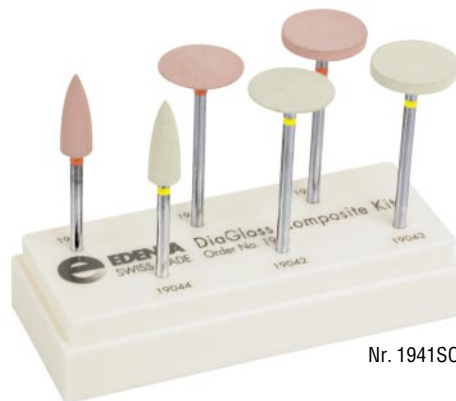

Nr. 1941SO



Nr. 1109SO

Best.Nr. 1941SO
DiaGloss HP Composite Kit

Spezielles **diamant-imprägniertes Oberflächen-Bearbeitungssystem** zum **Formen und Hochglanz-Polieren** von **Composites**. Mit dem **FINIERER** (rosa) erhält man sehr schnell eine glatte, vorpolierte Oberfläche. Mit dem Polierer (weiss) erzielt man in Sekundenschnelle die Glanzpolitur: ohne Stauben und ohne Schmierer. Das Set enthält 3 Finierer und 3 Polierer.

Order No. 1941SO
DiaGloss HP Composite Kit

*Unique **diamond-impregnated surface treatment system** for **contouring and high-gloss polishing of composites**. Pink **FINISHER** ensures a very fast pre-polished surface. With the white Polisher one will achieve a quick & easy high-shine. No dust, no smearing. The set contains 3 finishing and 3 polishing instruments.*

Réf. 1941SO
Kit composite DiaGloss PM

Système de traitement de surface à **polissoirs diamantés par imprégnation, pour le façonnage et le lustrage brillant des composites**. Avec le **POLISSOIR** (rose), une surface lisse et pré-polie est rapidement obtenue. Avec le **POLISSOIR DE FINITION** (blanc), un lustrage brillant est réalisable en quelques secondes sans poussière ni traînées. Le set comprend 3 polissoirs et 3 polissoirs de finition.

Best.Nr. 1109SO
Occlupol Sortiment

Kauflächen-Polierer für Chrom-Kobalt-Legierungen und Edelmetalle.
Inhalt: 50 Stück 1101 braun/grob, 25 Stück 1102 rot/mittel, 25 Stück 1103 grün/fein, 1 Mandrell, 1 Abziehstein, 1 Stahlbürstchen. Drehzahlbereich: 20.000 upm

Order No. 1109SO
Occlupol Assortment

*Occlusal Surface Polisher for chrome-cobalt and precious metals and amalgam.
Contents: 50 pcs 1101 brown/coarse, 25 pcs 1102 red/medium, 25 pcs 1103 green/fine, 1 mandrel, 1 dressing stone, 1 steel-brush (small).
Recommended speed: 20.000 rpm*

Réf. 1109SO
Assortiment Occlupol

Set pour le polissage des faces occlusales en chrome-cobalt et en alliages précieux.
Contenu: 50 unités 1101 marron/rugueux, 25 unités 1102 rouge/moyen, 25 unités 1103 vert/fin, 1 mandrin, 1 pierre de modelage, 1 brosse en acier.
Vitesse: 20.000 tr/min.



Best.Nr. 1700SO
Titanium Lab Adjustment Kit

Titanbearbeitung mit System: für jede Arbeitsphase das richtige Instrument.

1. Vorschleifen mit Super-Max Sinterdiamant mit organischer Bindung.
2. Anschließend wird mit den spiralverzahnten Hartmetallfräser gearbeitet. Die spezielle Schneidegeometrie verhindert ein Zusetzen.
3. Der graue Vorpoliierer trägt ab, der blaue Glanzpolierer glättet die Oberfläche für die anschließende Hochglanzpolitur mit Polierpaste.



Nr. 1700SO

Order No. 1700SO
Titanium Lab Adjustment Kit

Tool System for work on Titanium. The right instruments for each phase during the working process are:

1. *Pre-grinding with the Super-Max sintered diamond instrument, ideal for gross reduction on any type of titanium alloy.*
2. *TC cutters with a fine spiral cut (toothing) for smoothing the metal surface.*
3. *Synthetic Polishers for Titanium, two different polishers, one for pre-polishing (grey) and the other one (blue) for high-gloss finish.*

Réf. 1700SO
Kit de retouche pour titane

Usinage du titane, avec système: le bon instrument pour chaque étape de travail.

1. Dégrossissage avec le diamant fritté Super-Max à liant organique.
2. Le travail est poursuivi avec la fraise en carbure à denture hélicoïdale. La géométrie particulière des lames évite un bourrage.
3. Le pré-polisseur gris a une action de pré-polissage, le polissoir fin bleu lisse la surface en vue du lustrage ultérieur à la pâte à polir.

Best.Nr. 2110SO
Softrelining Polisher Set -10

- 10 Softcrack
- 1 Mandrell 4029HP
- 1 HM-Fräser 7275.060HP

Softcrack

weiche, elastische Multilayer Schleifscheiben mit optimaler Korngrösse zur Bearbeitung von weichbleibenden Basiskunststoffen, zum Beschleifen und Konturieren von weichbleibenden Unterfütterungen, Positioner, flexible Schienen, Mundschutz, Wundverbände.

Hartmetallfräser - Schliff 75

mit Einfachverzahnung und Querhieb zur Ausarbeitung von weichbleibenden Kunststoffen/Unterfütterungen.

Order No. 2110SO
Softrelining Polisher Set -10

- 10 Softcrack
- 1 mandrel 4029HP
- 1 TC-Cutter 7275.060HP

Softcrack

soft, elastic Multilayer grinding Discs with optimal grit size for rapid and effective operating on soft and elastic resins, for grinding and contouring of soft relinings, positioners, flexible splints, mouth guards, wound dressings.

TC-Cutter - cut 75

plain toothing with transverse for trimming of soft acrylics/soft relinings.

Réf. 2110SO
Kit pour résine molle Set -10

- 10 Softcrack
- 1 mandrin 4029HP
- 1 fraise en carbure 7275.060HP

Softcrack

disques abrasifs multicouche. Avec une granulométrie optimale pour un travail efficace sur la résine molle pour fraiser, abraser et contourer la résine molle, les gouttières, les amatures flexibles et les protège-dents.

Fraise en carbure - denture 75


denture simple avec entaille transversale pour l'élaboration d'acryliques doux/résines molles.



Nr. 2110SO

Best.Nr. 0630SO
Acrylic Polisher HP blue Kit

Kunststoffpolierer zum schnellen Vorschleifen (blau), Glätten (hellblau) und Hochglanzpolieren (gelb) von **prothetischen Acrylaten**. Abrasiver Schliff durch neuartige Füllstoffe. Langmaschige Silikone mit speziellen Abrasivkörpern sichern kontrolliertes und schnelles Abtragen sowie glatte Vorpolutur.

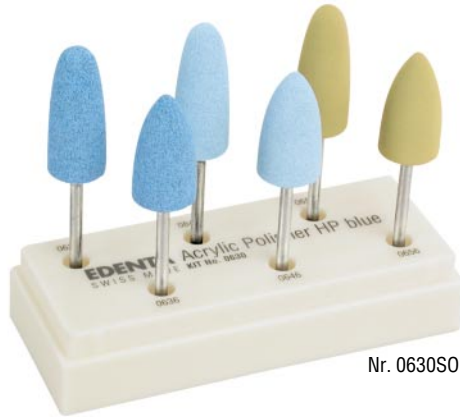

Nr. 0630SO

Order No. 0630SO
Acrylic Polisher HP blue Kit

*Advanced surface treatment system for rapid trimming (blue), smoothing (light blue) and high-gloss polish (yellow) of **prosthetic acrylics**. Abrasive trimming due to unique abrasive bodies. New type of long-chain silicones with specific abrasive bodies which ensure controlled & rapid reduction combined with a smooth prepolish.*

Réf. 0630SO
Kit de polissage PM pour prothèse adjointe

Polissoirs en matière synthétique pour le pré-polissage rapide (bleu), le polissage (bleu clair) et le lustrage brillant (jaune) des **résines acryliques prothétiques**. Effet abrasif grâce à des charges d'un genre nouveau. Des silicones à chaînes longues avec des particules abrasives spéciales permettent un enlèvement contrôlé et rapide de matériau ainsi qu'un pré-polissage lisse.



Nr. 0090SO

Best.Nr. 0090SO
Denture Adjustment Kit

Ein in der Praxis unentbehrliches Sortiment zum Entfernen von Druckstellen an Kunststoffprothesen. Dieses Sortiment enthält 1 Spezial HM-Fräse zum Abtragen der Druckstelle, 4 graue Siliconpolierer zum Glattschleifen, 1 gelber Siliconpolierer zum Hochglanzpolieren. Sie erzielen damit eine beachtliche Zeiteinsparung. Auch in Winkelstück lieferbar. Bestell Nr. W0090 SO.

Order No. 0090SO
Denture Adjustment Kit

Kit consists of 6 assorted points in HP Shank. These points are used specifically for chair-side adjustments and polishing adjusted surfaces for all resin prostheses. 1 TC Trimmer for cutting, 4 silicone points EXA TECHNIQUE for initial polishing, 1 silicone point for high lustre final polishing. Also available in RA Shank. Order no. W0090 SO.

Réf. 0090SO
Kit de retouche pour prothèse adjointe

Assortiment indispensable pour l'élimination des points de pression sur les prothèses adjointes. Cet assortiment comprend 1 fraise spéciale en carbure pour l'abrasion du point de pression, 4 polissoirs gris en silicone pour le lissage et 1 polissoir jaune en silicone pour le lustrage brillant. Vous bénéficierez d'un gain de temps appréciable. Disponible également en version pour contre-angle, réf. W 0090SO.



Nr. 0391SO

Best.Nr. 0391SO
Cerapol Labor Porcelain Adjustment Kit

Set besteht aus 2 HM Fräsern, welche für Keramik besonders gut geeignet sind. 3 Schraubmandrelle sowie 3 Dtzd. Polierräder mit unterschiedlicher Körnung. Die weissen Räder werden zum Abtragen und der Vorpolutur verwendet. Das rosa Rad wird für die Feinpolitur verwendet. Mit dem grauen Rad wird ein absoluter Hochglanz erzielt. Zum Abtragen 20.000 upm / Zum Polieren 10.000 upm

Order No. 0391SO
Cerapol Lab Porcelain Adjustment Kit

Set consists of 1 dozen white wheels for pre-polishing. 1 dozen pink wheels for final polishing and 1 dozen grey wheels for high-gloss polishing of porcelain, 2 TC cutters, cross cut superfine and 3 mandrels. Important note: rpm recommendations i.e. for grinding and abrasive work 20.000 rpm for final polish – below 10.000 rpm

Réf. 0391SO
Kit Cerapol pour les retouches de céramiques

Le set comprend 2 fraises en carbure particulièrement bien adaptées pour la céramique. 3 mandrins à vis ainsi que 3 douzaines de polissoirs en forme de roue à grains différents. Les roues blanches sont utilisées pour le pré-polissage, les roues roses pour le polissage fin et les roues grises pour le lustrage. Pré-polissage: 20.000 tr/min. Polissage et lustrage: 10.000 tr/min.



Nr. 0080SO

Best.Nr. 0080SO
Orthodontic Burs Starter Kit

Set enthält eine Reihe von Instrumenten, welche in der Orthodontie Verwendung finden. Man kann damit auf Kunststoffe und Metallegierungen Abtragen, Feinschleifen und Polieren. Das Sortiment besteht aus je 1 Stück HM Fräser mit extragrober und grober Verzahnung zum Abtragen von Kunststoff und Gips. 2 feine Konturenfräser aus HM, 2 Stück Kunststoffpolierer grau zum Abtragen und ein Stück gelb für die Hochglanzpolitur sowie 12 Stück weisse Siliconpoliererräder mit passendem Schraubmandrell.

Order No. 0080SO
Orthodontic Burs Starter Kit

The set contains 4 different trimmers/burs, 3 mounted lab polishers and a polishing wheel, plus a screw type mandrel, and is utilized mainly for adjustments in the Laboratory. All 4 burs/cutters are generally used to trim acrylics of functional appliances, and in the case of the jumbo acrylic cutter to trim bulk stone off working and study models. The two grey medium-grit polishers are used for rough finish on acrylic repairs and the yellow fine-grit polishers for high-shine. The polishing wheel and mandrel are primarily used to polish wires and bands that have been soldered.

Réf. 0080SO
Kit de fraises orthodontique

Le set comprend une série d'instruments ayant leur utilité en orthodontie. Avec eux, il est possible de réaliser sur les résines et les alliages des effets d'enlèvement, de lissage et de polissage. L'assortiment se compose d'une fraise PM à denture extra grosse et une à denture grosse pour assurer le retrait de matériau tel que la résine et le plâtre, de 2 fraises fines en carbure pour le façonnage, de 2 polissoirs en matière synthétique gris pour le polissage et 1 jaune pour le lustrage brillant ainsi que de 12 polissoirs blancs en silicone en forme de roue avec un mandrin à vis adéquat utilisés pour polir les fils et bandes après soudure.

